

SIRIO S2/T

EMERGENCY
LUNG VENTILATOR

VENTILADOR
PULMONAR DE
EMERGENCIA



sicare

EMERGENCY



Sirio S2T



VENTILADOR PULMONAR DE EMERGENCIA

Ventilador de emergencia portátil de pequeñas dimensiones y peso ligero aplicable para tratamientos respiratorios de adultos niños y recién nacidos tanto para intubación invasiva y máscara.

El principio de trabajo del ventilador:

volumétrico, tiempo ciclado, presión limitada con un amplio programa de modos ventilatorio:

- AUT+AST-PSV+ RESERVA APNEA
- CPAP - NIV

Volumen de Minuto: de 1 a 16 l.p.m

Límite de presión: de 0 a 50 cm H₂O

Volumen Tidal de 15 a 3000 ml.

Frecuencia: de 5 a 70 l.p.m

Presión: de -1 a -5 cm H₂O

PEEP: ajustable de 0 a 20 cm H₂O

Equipo mezclado integrado con posibilidad de determinar la mezcla de oxígeno en 50% y 100%.

Alarmas visuales y acústicas para:

Apnea, nivel bajo de batería, presión alta, presión baja, falla del suministro de entrada de gas y falla de suministro de poder.

Autonomía de la batería: 6 horas con posibilidad unir 18 horas de autonomía añadiendo un paquete de batería opcional.

Ventilatore polmonare da trasporto di dimensioni e peso contenuto ideale per il trattamento respiratorio di pazienti adulti, bambini e neonati sia intubati che con maschera. Principio di funzionamento volumetrico ciclato a tempo limitato a pressione con ampie modalità di ventilazione: AUT+AST - PSV con APNEA BACK-UP - CPAP - NIV

Volume minuto regolabile:

dal da 1 a 16 l/min.,

Limite di pressione regolabile:

da 0 a 50 cmH₂O ;

Volume corrente: da 15 a 3000 ml;

Frequenza respiratoria regolabile:

da 5 a 70 bpm,

Trigger a pressione regolabile:

da -1 a -5 cmH₂O;

PEEP integrata regolabile:

da 0 a 20 cmH₂O.

Mixer integrato con possibilità di impostare la miscela ossigeno al 50 % e 100%.

Dotato di allarmi acustici e visivi per: apnee, batteria scarica, alta pressione, bassa pressione, mancanza alimentazione gas in ingresso e di rete.

Autonomia della batteria 6 ore con possibilità di implementare la durata fino a 18 ore con apposito gruppo batteria addizionale.



Versión en bolsa profesional para facilitar el transporte del ventilador con soporte para un cilindro de oxígeno de 2 litros completo con soporte con conexión rápida para instalación en ambulancia.

Versione da trasporto con professionale borsa in cordura per alloggiamento ventilatore e bombola da lt. 2 completa di supporto sgancio/aggancio rapido per ambulanza.


El ventilador es suministrado con una asa para ser colgado en la cama del paciente y en una barra de pared de 30 x 10 mm.

Il ventilatore è fornito di maniglia predisposta per ancoraggio al letto e barella e per barra normalizzata a parete mis. 30x10 mm.



Versión profesional del sistema tubular de acero inoxidable profesional para facilitar el transporte del ventilador con alojamiento para un cilindro de oxígeno de 2 lts. completo con soporte con conexión rápida para instalación en ambulancia.

Versione da trasporto con professionale supporto in tubolare di acciaio per ventilatore e bombola da 2 lts., predisposto per attacco al letto e barella con possibilità di piastra sgancio rapido per l'installazione in ambulanza.

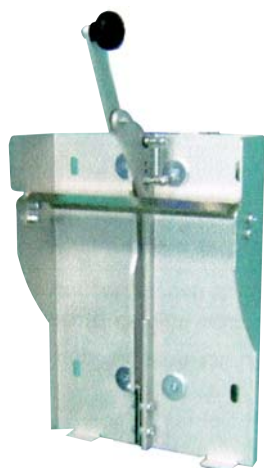

Placa de conexión rápida para soporte del ventilador tubular para ser instalada en ambulancia.

Piastra sgancio/aggancio rapido per installazione in ambulanza per supporto tubolare porta ventilatore e bombola.

Cod. 09436 - SIRIO S2/T**Accesorios Estándar:**

- n.1 unidad de suministro de poder 100-240 Vac/ 12 Vdc (cod. G30146100)
- n.1 cable de suministro de poder de 12V (cod. G30147100)
- n.1 manguera de suministro O₂ (cod. G60005100)
- n.1 circuito de silicona de paciente (cod. 102641/SLU)
- Manual de Usuario

**Código A26.049048**

Coche para ventilador con 5 ruedas y 1 canasta para accesorios.

**Código 03000**

Humidificador Electrónico VAPOUR 2

**Código G00203001**

Placa para conexión rápida de soporte tubular del código G00208000

**Código 05048**

Coche Castor LT para ventilador

**Código G90003000**

Bolsa de transporte para ventilador

**Código 102641 /SLU**

Circuito del paciente de silicona

**Código 06750/SB**

Brazo de soporte para circuito de paciente de acero inoxidable con abrazadera.

**Código G00208000**

Soporte del ventilador con alojamiento para un cilindro de lt. O₂

**Código G80063001**

Paquete de batería adicional (12 horas de autonomía).

PARA OTROS ACCESORIOS POR FAVOR CONSULTAR LA LISTA DE PRECIOS - PER ALTRI ACCESSORI FARE RIFERIMENTO AL LISTINO PREZZI IN VIGORE



SINCERT

REG. N. 327
UNI EN ISO 9001-2000
UNI CEI EN ISO 13485-2002

CE 0476



SIARE no sólo es Investigación, Diseño, Fabricación y Ventas sino que también cuenta con un Servicio Técnico capacitado brindándole la máxima eficacia de sus productos.

SIARE non è solo ricerca, progettazione, produzione e vendita ma, con un servizio di assistenza che Vi seguirà passo passo lungo la strada.

siare
ENGINEERING
INTERNATIONAL GROUP s.r.l.

Via G. Pastore, 18
40056 Crespellano (BOLOGNA) ITALY
Phone: +39 (051) 96.98.02 (r.a.) - Fax: +39 (051) 96.93.66
General e-mail: mail@siare.it - Internet: www.siare.it

Distributed by: