


## SED

### Extricador/inmovilizador espinal

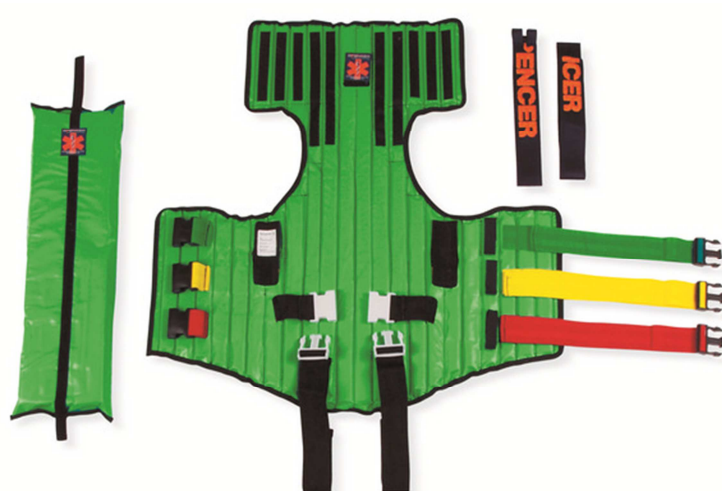

El chaleco de extricación SED es un dispositivo de primeros auxilios para ser empleado en la extricación de un paciente traumatizado de un vehículo. Se debe emplear con posterioridad a la aplicación del collarín cervical, para mantener la inmovilización y alineación cabeza-tronco.

#### Características específicas

Cinturones y sus hebillas son de diversos colores para hacer más intuitivo y rápido tanto la localización como el correcto enganche  
 Revestimiento de PVC para asegurar el saneamiento eficaz  
 La separación de los elementos rígidos, permite una alta rigidez vertical y flexibilidad horizontal  
 Cojín para la zona de la nuca

#### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Longitud                                 | 830 mm             |
| Anchura                                  | 900 mm             |
| Espesor máximo <sup>(1)</sup>            | 25 mm              |
| Dimensiones enrollado con bolsa (aprox.) | 850 x 250 x 120 mm |
| Longitud correas                         | 74 ± 2 cm          |
| Materiales                               | PVC, Nailon, PP    |
| Peso sin bolsa                           | 2,60 kg            |
| Peso con bolsa                           | 2,85 kg            |
| Capacidad máxima                         | 230 kg             |

<sup>(1)</sup> en correspondencia con los ganchos o hebillas

#### Equipamiento de serie

Bolsa de transporte

DM de clase I de acuerdo con el Reg. UE 2017/745

SED INMOBILIZADOR DE COLUMNA



SR00111B

Clasificación CND

V0804

ID de registro

102330

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.0 (30/11/2020)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)

© Copyright Este documento es propiedad de SPENCER ITALIA S.R.L. y no puede ser reproducida, usada y divulgada sin el consentimiento por escrito de Spencer Italia S.r.l.