

Mascarilla Laríngea Supreme de 2 Vías tamaño 4 – LMA

\$0.00

SKU: Mascarilla Laríngea Supreme de 2 Vías tamaño 4 - LMA (175040)

Link: <https://equipomexmedical.com/productos/anestesia/mascarillas-laringeas/mascarilla-laringea-supreme-lma-175040/>



Product Information

Categories: Anestesia, LMA, Mascarillas Laríngeas, Mascarillas Laríngeas Supreme


Tamaño: No. 1, No. 1.5, No. 2, No. 2.5, No. 3, No. 4, No. 5

Product Description

La mascarilla laríngea LMA Supreme™ es un dispositivo de acceso gástrico de segunda generación de un solo uso que forma un First Seal™ eficaz con la orofaringe (sello orofaríngeo) y un Second Seal™ innovador con el esfínter esofágico superior (el sello esofágico).

La importancia del Second Seal™ (sello esofágico) es significativo. Puede minimizar la insuflación gástrica y reducir el riesgo de aspiración, lo que le brinda la confianza de ir más allá con una mascarilla laríngea para las vías respiratorias.

Mascarilla LMA® Supreme™

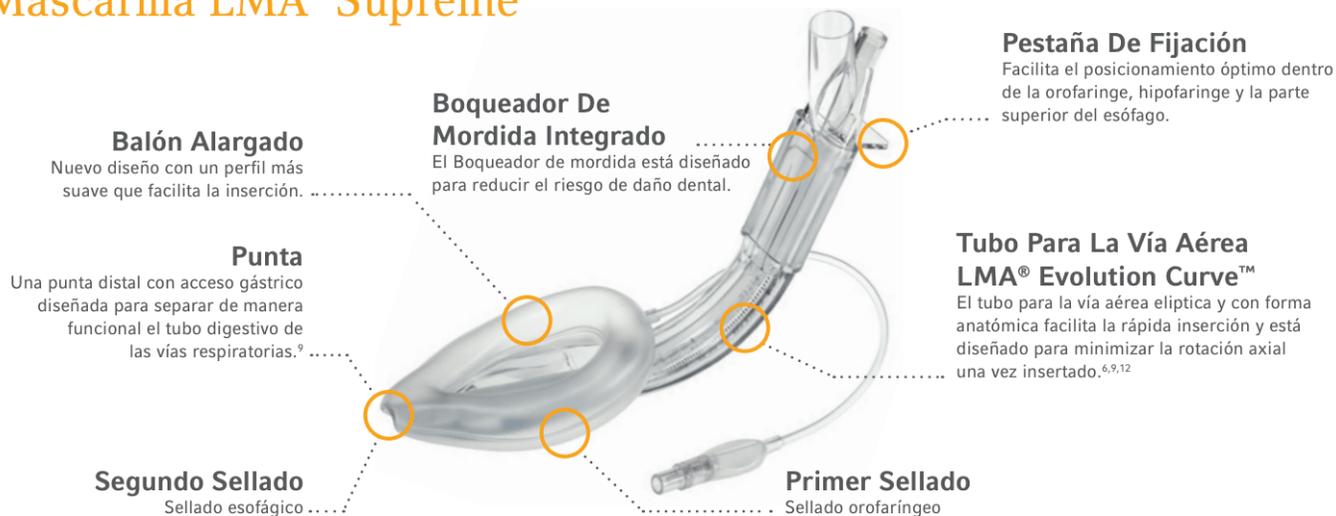

Datos Principales De La Mascarilla LMA Supreme

La mascarilla LMA Supreme está diseñada para reducir el riesgo de aspiración, lo que la convierte en una opción adecuada en pacientes con obesidad leve a moderada o en pacientes con reflujo controlado.^{1,2,6}

Una vasta evidencia clínica respalda el uso de la mascarilla LMA Supreme en un amplio rango de procedimientos de rutina y avanzados.³⁻⁷

El tubo de la vía aérea elíptica con forma anatómica facilita la inserción rápida, lo que hace que la mascarilla LMA Supreme sea adecuada para su uso en los departamentos de emergencia, en carros de reanimación y para el manejo de las vías respiratorias en un entorno prehospitalario.^{9,12}

Con presiones de sellado orofaríngeo >27 cm H₂O, la mascarilla LMA Supreme puede respaldar correctamente procedimientos que requieren ventilación con presión positiva.^{4,10-12}